

## GR Nuvita 1150 – σετ παιδικής ηλεκτρικής οδοντόβουρτσας

### Οδηγίες βουρτσίσματος:

- Υγράνετε το βουρτσάκι της οδοντόβουρτσας και απλώστε κατάλληλη ποσότητα οδοντόκρεμας
- Χωρίστε την περιοχή της στοματικής κοιλότητας σε πάνω, κάτω, δεξιά και αριστερή πλευρά
- Ακουμπήστε το βουρτσάκι της οδοντόβουρτσας έναντι των δοντιών με ελαφριά κλίση προς τη γραμμή των ούλων.
- Πιέστε το κουμπί λειτουργίας για να ενεργοποιηθείτε την οδοντόβουρτσα και μετακινήστε την απαλά
- Αφού βουρτσάσετε και τις 4 πλευρές, πιέστε ξανά το κουμπί λειτουργίας για να την απενεργοποιήσετε.
- Για την αποφυγή πιτσιλισματος, απενεργοποιήστε την οδοντόβουρτσα πιέζοντας το πλήκτρο ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης πριν τη βγάλετε από το στόμα
- Βουρτσάστε κάθε πλευρά για 30 δευτερόλεπτα, αφιερώνοντας από 10 δευτερόλεπτα στην μπροστινή, την πίσω επιφάνεια και την επιφάνεια μάσησης.


### Προειδοποιήσεις:

- Τα παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών πρέπει να επιτηρούνται από τους γονείς ή από κάποιον ενήλικο.
- Μην αφιρνετε ποτέ το παιδί μόνο του όταν έχει στο στόμα ή στο χέρι του κάποιο από αυτά τα εξαρτήματα. Αυτό το προϊόν δεν είναι παιχνίδι.
- Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για οικιακή χρήση, για τον καθαρισμό των δοντιών, των ούλων και της γλώσσας. Μην το χρησιμοποιείτε για άλλους σκοπούς.
- Μην ανοίγετε, επισκευάζετε ή τροποποιείτε το προϊόν χωρίς σχετική εξουσιοδότηση
- Μην βυθίζετε το προϊόν σε νερό για μεγάλο χρονικό διάστημα
- Προστατεύστε το από υψηλές θερμοκρασίες και άμεση έκθεση στο ηλιακό φως
- Αφαιρέστε τη μπαταρία αν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε το προϊόν για μεγάλο χρονικό διάστημα
- Αν υποβλήθηκατε σε χειρουργική επέμβαση του στόματος ή των ούλων εντός των τελευταίων 2 μηνών, συμβουλευθείτε τον οδοντίατρό σας πριν τη χρήση αυτού του προϊόντος
- Επικοινωνήστε με το οδοντίατρό σας σε περίπτωση έντονης αιμορραγίας μετά τη χρήση αυτού του προϊόντος ή αν η αιμορραγία συνεχίζεται μετά από 1 εβδομάδα χρήσης
- Μην πιέζετε ή χτυπάτε το προϊόν με υπερβολική δύναμη.
- Χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν μόνο σύμφωνα με την περιγραφή του εγχειριδίου.
- Μην χρησιμοποιείτε άλλες κεφαλές πέτρα από αυτές που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.

### Προδιαγραφές:

- Υλικό: Νάιλον DuPont/ABS/TPE
- Τροφοδοσία: 1x μπαταρία AAA
- Συχνότητα: 16.000 παλμοί ανά λεπτό
- Διάρκεια ζωής μπαταρίας: έως 150 ημέρες
- Διαστάσεις προϊόντος: 28 x 25 x 135 mm

### Για να αλλάξετε κεφαλές:

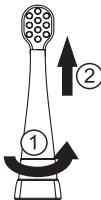


Χαλαρώστε και αφαιρέστε την κεφαλή εγκατεστημένη (οδοντόβουρτσα, τη γλώσσα ή ηλεκτρική σκούπα ούλα) περιστρέφοντάς το αριστερόστροφα (1), τότε ανύψωσης (2).

Εισάγετε τη νέα κεφαλή εκτύπωσης στην εγκοπή (1) και γυρίστε το αριστερόστροφα (2) έως ότου η εγκοπή στο λαϊμό είναι ευθυγραμμισμένη με τις εσωτερικές εγκοπές, για να συντρίψει.



### Αντικατάσταση της μπαταρίας

- Περιστρέψτε το κάλυμμα του διαμερίσματος μπαταριών σύμφωνα με την εικόνα (1) και τραβήξτε το προς τα κάτω σύμφωνα με την εικόνα (2)
- Τοποθετήστε μια καινούρια μπαταρία AAA σύμφωνα με τη σωστή πολικότητα (-,+)
- Τοποθετήστε το κάλυμμα του διαμερίσματος μπαταριών σύμφωνα με την εικόνα (3) και περιστρέψτε το για να ασφαλίσει σύμφωνα με την εικόνα (4)

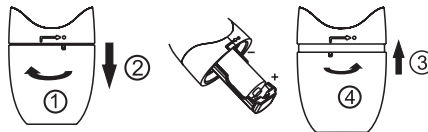

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΛΩΣΣΑΣ

- Καθαρίζετε τακτικά την κεφαλή καθαρισμού γλώσσας με ζεστό νερό πριν και μετά τη χρήση.
- Ακουμπήστε την κεφαλή καθαρισμού γλώσσας στο κέντρο της γλώσσας του βρέφους και ενεργοποιήστε τη συσκευή. Ασκώντας ελαφριά πίεση, τραβήξτε την προς τα εμπρός και βεβαιωθείτε το παιδί δεν επιδεικνύει σημάδια δυσφορίας.

- Ακουμπήστε την κεφαλή καθαρισμού γλώσσας στο πίσω άκρο της γλώσσας και μετακινήστε την προς τα εμπρός.
- Απενεργοποιήστε τη συσκευή μετά τη χρήση.

### ΚΕΦΑΛΗ ΜΑΣΑΖ ΟΥΛΩΝ

- Καθαρίζετε τακτικά την κεφαλή μασάζ ούλων με ζεστό νερό, πριν και μετά τη χρήση.
- Κάντε μασάζ στα ούλα ασκώντας ελαφριά πίεση με κυκλικές κινήσεις στη γραμμή των ούλων. Επαναλάβετε τη διαδικασία για όλα τα δόντια κατά μήκος της γραμμής των ούλων, στην εσωτερική και την εξωτερική πλευρά των δοντιών.

### ΕΓΓΥΗΣΗ-ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙ

Σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθεσίες, ο κατασκευαστής παρέχει στον καταναλωτή μια νόμιμη εγγύηση 24 μηνών από την ημερομηνία αγοράς που αναγράφεται στην απόδειξη. Εξαιρούνται από την εγγύηση τα "αναλώσιμα" μέρη (πχ μπαταρίες, βουρτσάκια ή μέρη που υπόκεινται σε φθορά). Η νόμιμη εγγύηση των 24 μηνών ακυρώνεται εάν:

- Το προϊόν έχει υποστεί αισθητή βλάβη εξαιτίας λανθασμένης χρήσης.
  - που δεν συνάδει με τις οδηγίες του εγχειριδίου.
  - Το προϊόν έχει τροποποιηθεί ή αλλοιωθεί.
  - Αιτία της αποτυχίας χρήσης ήταν η ανεπαρκής συντήρηση των.
  - εξαρτημάτων/των μερών (πχ οξειδωση ή σκουρίασμα λόγω κατακράτησης νερού ή άλλων υγρών, κατακάθια που μπλοκάρουν τον.
  - αισθητήρα, διαρροή υγρού μπαταριών).
  - Αποκλείονται από τη νόμιμη εγγύηση 24 μηνών:
  - Κόστος αντικατάστασης ή επισκευής μερών που υπόκεινται σε φθορά ή κόστος κανονικής συντήρησης του προϊόντος.
  - Το κόστος και οι κίνδυνοι που περιλαμβάνονται στη μεταφορά του προϊόντος από και προς το κατάστημα όπου αγοράστηκε για την παραλαβή των μερών που καλύπτονται από την εγγύηση.
  - Βλάβη που προκαλείται από λανθασμένη τοποθέτηση ή χρήση που δεν είναι σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του εγχειριδίου.
  - Βλάβη εξαιτίας φυσικών καταστροφών, ατυχημάτων ή δυσμενών συνθηκών που δεν είναι συμβατές με το προϊόν.
- Σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθεσίες, ο κατασκευαστής παρέχει στον καταναλωτή μια νόμιμη εγγύηση 24 μηνών από την ημερομηνία αγοράς που αναγράφεται στην απόδειξη. Εξαιρούνται από την εγγύηση τα "αναλώσιμα" μέρη (πχ μπαταρίες, βουρτσάκια ή μέρη που υπόκεινται σε φθορά).