

## II Nuvita 1150 – Kit igiene dentale

### Uso dello spazzolino:

- Bagnare le setole dello spazzolino ed applicare il dentifricio
- Dividere idealmente l'area della bocca in 4 sezioni: sopra, sotto, destra e sinistra
- Posizionare le setole dello spazzolino contro i denti con una leggera angolazione verso il bordo gengivale
- Premere il pulsante di alimentazione per accendere l'apparecchio quindi muovere delicatamente lo spazzolino.
- Dopo aver terminato la spazzolatura di ognuna delle 4 sezioni, premere di nuovo il pulsante di alimentazione per spegnerlo
- Per evitare schizzi, spegnere lo spazzolino prima di toglierlo dalla bocca spremendo il pulsante on / off
- Per una buona igiene orale si suggerisce di spazzolare ogni sezione per 30 secondi, dedicando 10 secondi alla parte frontale dei denti, alla parte posteriore e alle superfici di masticazione

### Avvertenze:

- I bambini al di sotto di 8 anni devono essere sorvegliati da un genitore o un adulto durante l'utilizzo dell'apparecchio
- Non lasciare mai il bambino da solo con lo spazzolino o qualsiasi degli accessori in bocca o in mano
- Questo prodotto non è un giocattolo.
- Questo prodotto è progettato solo per uso domestico per la pulizia dei denti, gengive e la lingua, non utilizzarlo per altri scopi.
- Non aprire, riparare o alterare il prodotto senza autorizzazione
- Non immergere il prodotto in acqua per un lungo periodo di tempo
- Non esporre il prodotto a condizioni di elevata temperatura o direttamente alla luce diretta del sole.
- Togliere le batterie se si ha intenzione di non utilizzare l'apparecchio per un periodo di tempo prolungato
- Contattare il dentista caso di eccessivo sanguinamento dopo l'utilizzo di questo apparecchio o se il sanguinamento persiste dopo 1 settimana di pulizia
- Preservare l'apparecchio da colpi od urti. Utilizzare questo apparecchio come descritto nel manuale.
- Non utilizzare altre testine diverse da quelle consigliate dal produttore

### Caratteristiche tecniche:

- Materiale: DuPont Nylon/ABS/TPE
- Alimentazione: 1 batteria AAA
- Frequenza: 16,000 oscillazioni al minuto
- Durata della batteria: fino a 150 giorni
- Dimensioni del prodotto: 28 X 25 X 135 mm

Questo kit per igiene dentale può essere utilizzato con 3 testine diverse incluse in questa confezione: spazzolino, pulisci-lingua e massaggia/pulisci-gengive.


Per cambiare ognuna delle testine vi preghiamo di seguire le istruzioni qui di seguito indicate.

### Per cambiare le testine:




Allentare e rimuovere la testina installata (spazzolino, pulisci-lingua o pulisci-gengive) ruotando in senso antiorario (1) poi sollevandola (2).

Inserire la nuova testina nella tacca (1) e girare in senso antiorario (2) fino a che la tacca presente sul collo sia allineata con le tacche interne, in modo da bloccarsi.

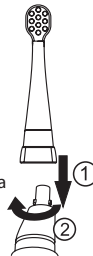

### Sostituzione della batteria

- Girare il coperchio della batteria come indicato in figura (1) e sfilare come in figura (2)
- Inserire una nuova batteria con (-)
- Riposizionare il coperchio della batteria come in figura (3) e girarlo fermamente come indicato in figura 4

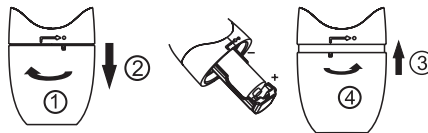

### Pulizia della lingua

- Pulire la testina pulisci-lingua regolarmente con acqua tiepida prima e dopo ogni utilizzo
- Appoggiare delicatamente il pulisci-lingua al centro della lingua del bambino e azionare l'apparecchio. Con una lieve pressione tirare in avanti verso l'esterno della bocca assicurandosi che il bambino non provi alcun disagio fisico durante l'operazione.
- Se il bambino non mostra fastidio sarà possibile quindi pulire la lingua partendo da una posizione più arretrata rispetto al centro, in modo da effettuare una corretta igiene.
- Spegnerlo sempre l'apparecchio dopo l'uso

### Massaggio/pulizia delle gengive

- Pulire la testina regolarmente con acqua tiepida prima e dopo l'utilizzo
- Con una lieve pressione e moto circolare passare sulle gengive per il massaggio. Ripetere l'operazione (spazio) dente per (spazio) dente sul bordo della gengivale sia sulla parte interna che esterna

### Garanzia - Condizioni

Questo apparecchio beneficia di una garanzia di 24 mesi sui materiali e sui difetti di fabbricazione del prodotto, a partire dalla data di acquisto (vedi scontrino).

La garanzia di 24 mesi non comprende i danni causati dal consueto uso di soggetti individuati come "materiale di consumo" (ad esempio, le batterie, le testine o le parti soggette ad usura). La garanzia legale di 24 mesi è valida qualora:

1. Il prodotto ha subito danni estetici dovuti ad un uso improprio non conforme alle istruzioni contenute nel manuale. Questo prodotto è stato modificato e/o manomesso.
2. La causa del mal funzionamento è dovuta alla scarsa manutenzione dei singoli componenti e/o accessori e/o forniture (es. ossidazione e/o ridimensionamento dovuto alla ritenzione di acqua o altri liquidi, residui che bloccano il sensore, perdita di liquido corrosivo dalle batterie).

Quello che segue è escluso dalla garanzia legale di 24 mesi:

1. I costi relativi alla sostituzione e/o riparazione di parti soggette ad usura o costi per la manutenzione ordinaria del prodotto. I costi ei rischi connessi al trasporto del prodotto da e verso il
2. negozio dove è stato acquistato o centro di raccolta altrimenti autorizzato a ricevere i prodotti in garanzia. Causa da danni derivanti da un'errata installazione o da uso
3. improprio o non in conformità con le istruzioni del manuale di istruzioni.
- Danni dovuti a calamità naturali, accidentali o condizioni
4. avverse non compatibili con il prodotto. Difetti che hanno un effetto trascurabile sulle prestazioni del
5. prodotto.

Il produttore, distributore e tutte le parti coinvolte nella vendita del prodotto non si assumono alcuna responsabilità per perdite e danni economici di qualsiasi malfunzionamento del prodotto. In base alla normativa vigente, il produttore, distributore e tutte le parti coinvolte nella vendita non rispondono in nessun caso per danni, vizi compresi, quelli diretti, indiretti, perdita di reddito netto, perdita di risparmi e danni aggiuntivi e altri dettagli conseguenze che vanno al di là del danni causati dalla violazione della garanzia, contratto, responsabilità oggettiva, illecito o per altre cause, derivanti dall'uso o dall'impossibilità di utilizzare il prodotto e / o documenti cartacei ed elettronici, compresa la mancanza di servizio.

Per ulteriori informazioni sul servizio di assistenza, visitare il Sito [www.nuvitababy.com](http://www.nuvitababy.com)