


Parabéns pela sua compra deste multi-função de termômetro digital, permitelhe medir a temperatura do corpo. Para o uso adequado e segurança para o usuário aplicar respeitar escrupulosamente as precauções e avisos listados neste manual. Antes de usar o termômetro digital, leia atentamente e cuidadosamente este manual e guarde-o para referência futura.

## DESCRIÇÃO DO PRODUTO



1. Tampa do sensor
2. Sensor Orelha
3. Botão START
4. Lanterna LED
5. Botão ON/OFF
6. Baterias

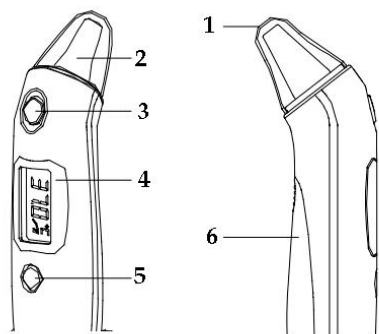

Limpe a sonda com álcool após cada utilização para manter a higiene e precisão.

## PREPARAÇÃO

Verifique se as pilhas são novas. Se você trocar as pilhas com duas pilhas AAA novas.

Para obter medições confiáveis que esperar 30 minutos para ajustar o termômetro em temperatura ambiente.

As mudanças de temperatura podem causar medições não confiáveis, por isso não coloque o termômetro na frente dos radiadores, aparelhos de ar condicionado ou aquecimento antes da medição, como você pode obter resultados inconsistentes.

Certifique-se que o ouvido está seco e limpo como a presença de cera ou resíduo de epitélio podem causar resultados inconsistentes.

Para garantir resultados precisos das medições são realizadas em repouso a temperatura corporal pode aumentar após o exercício ou após um banho.

## COMO MEDIR

Para medir a temperatura através do ouvido:

1. Insira cuidadosamente o sensor na orelha e pressione a tecla [START] para iniciar a medição
2. Aparecem na tela LCD a temperatura detectada

3. Durante a medição do termômetro firmemente desafio e não toque em qualquer tecla.

O resultado será automaticamente gravada na memória do termômetro é concedido o maior número de memória. Se o termômetro na memória já contém 32 valores medidos, o mais antigo é excluído e todos os outros, será atribuído um número de unidades menores da memória de medição como o mais recente será atribuído o maior número de memória.

É recomendável não executar mais de três medidas consecutivas. Antes de realizar qualquer medição 4 ° fazer uma pausa de 10 minutos. Quando terminar e depois de cerca de 30 segundos de inatividade, a função multi-termômetro digital retornará automaticamente ao modo de relógio. Se a função do sono está ativo, após cerca de 1 minuto de inatividade, o ecrã desliga-se automaticamente.

## Recursos avançados

Quando não em uso, o multi-função de termômetro digital exibe a hora atual e temperatura. Esta condição é chamada de “modo de relógio”.

## UNIDADE DE MEDIDA

Pressione e segure o botão [START] e [ON/OFF] para alternar entre Celsius (°C) para Fahrenheit (°F).

## DICAS

Para usuários iniciantes, recomenda-se realizar três medições de teste para a prática com o dispositivo. Considere o valor máximo no uso contínuo pode levar a uma tolerância de erro de  $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$  -  $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ .

Em pessoas saudáveis, não há diferença entre a orelha esquerda ou direita, de modo a experimentar medição de ambas as orelhas e medir a temperatura do ouvido que retorna o valor mais alto.

## SUBSTITUIR AS BATERIAS

1. Remova a tampa da bateria.
2. Sempre use pilhas novas do mesmo tipo (2 x AAA) e verifique a polaridade indicada no interior do compartimento da bateria (símbolos [+] e [-]).
3. Recoloque a tampa da bateria.

## MANUTENÇÃO

Limpe o aparelho com um pano macio, seco e limpo. Não mergulhe o aparelho em líquidos, solventes ou detergentes.

## CONSERVAÇÃO

Limpe o termômetro e cubra o sensor com a tampa após cada utilização. Não exponha o termômetro à luz solar direta, altas temperaturas, umidade, fogo, chamas e evitar colisões. Se você não usar o termômetro por um período muito longo, retire as pilhas.

## CALIBRAGEM

Este termômetro foi calibrado na fábrica. Se o termômetro é utilizado de acordo com as instruções contidas neste manual não é necessário recalibrar periodicamente. No caso de medições incorretas fortemente em contato com o revendedor local para procedimento de assistência. Não groped desmontar, reparar ou modificar o termômetro.

## LIMPEZA

Mantenha a superfície do sensor limpo contrário as medidas podem não ser confiáveis. Limpe a superfície do sensor com um cotonete embebido em água ou álcool, e novamente antes de usar o termômetro para secertificar de que a superfície do sensor é seco.

## USE DESTINA

Este termómetro digital é um dispositivo para medir a temperatura do corpo para uso doméstico, onde o monitoramento contínuo não é exigido pelo pessoal médico e paramédico. O dispositivo pode ser usado para medir a temperatura do corpo a partir da orelha ser utilizados seguindo cuidadosamente as instruções contidas neste manual. Qualquer utilização diferente daquela indicada neste manual deve ser considerado impróprio.

## PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

Os símbolos de aviso e logos neste manual destinam-se a alertar o usuário para evitar situações perigosas e evitar danos ao usuário e aos outros. A tabela a seguir fornece uma descrição:



Este símbolo indica informações ou indicações que devem ser seguidas para evitar o risco de danos para o usuário ou outras pessoas.



Este símbolo alerta o usuário que se você seguir as instruções que são susceptíveis de causar danos às pessoas ou objectos, tais como habitação, animais de estimação ou outros membros da família.



Este símbolo alerta o usuário que se você seguir as instruções que são susceptíveis de causar danos às pessoas ou objectos, tais como habitação, animais de estimação ou outros membros da família.



Este símbolo indica importantes obrigações expressamente indicado nas instruções a seguir.



Este símbolo indica que o produto está em conformidade com os requisitos de proteção contra choque elétrico dispositivo do tipo BF.



Symbol for “MANUFACTURER”



Symbol for “EUROPEAN REPRESENTATION”



## AVVISI PER L'UTENTE

Com base nos resultados obtidos através da medição da temperatura corporal com este dispositivo, é perigoso para os usuários a formular um diagnóstico e tomar a medicação sem consultar seu médico antes. Um diagnóstico incorreto e tratamento pode causar consequências graves e agravamento da doença. Siga sempre as instruções do seu médico.

Não toque ou engolir o sensor infravermelho. Um sensor de sujeira pode retornar os valores da temperatura do corpo não confiáveis e não confiáveis.

No caso de uma temperatura corporal acima de 38,0 ° C ea presença de sintomas de sofrimento pelo paciente imediatamente contactar o seu médico.

Mantenha longe das crianças, porque há peças pequenas que podem ser engolidas e causar situações perigosas.

A ingestão de qualquer das partes, como baterias ou cubra o sensor requer intervenção imediata por pessoal de emergência ou seu médico.

A falta de cautela na medição da temperatura através do ouvido pode causar danos e ferimentos.

Este dispositivo não se destina a ser usado por pessoas, incluindo crianças com deficiência física, deficiência sensorial e mental, ou falta de experiência ou conhecimento se não forem devidamente educados e treinados para usar o dispositivo por uma pessoa competente e responsável pela sua segurança.

No caso de doenças como infecções de ouvido ou doenças do tímpano, use um termômetro para medir a temperatura somente através da testa. Use o termômetro para medir a temperatura através do ouvido pode piorar a condição.

Se uma banheira ou chuveiro, não imediatamente realizar uma medição da temperatura, pois a presença de água residual pode causar danos ao ouvido.



Se necessário, muito delicadamente limpar o sensor infravermelho com um cotonete embebido em água ou álcool e espere até que a superfície esteja completamente seca antes de prosseguir com uma nova medição.

O uso de toalhas de papel podem arranhar o sensor de comprometer a eficiência e confiabilidade.

Se necessário, muito delicadamente limpar o sensor infravermelho com um cotonete embebido em água ou álcool e espere até que a superfície esteja completamente seca antes de prosseguir com uma nova medição.

O uso de toalhas de papel podem arranhar o sensor de comprometer a eficiência e confiabilidade.



O uso de remédios, como esponja com água fria ou gelo diminui a temperatura, assim você não precisa executar a medição imediatamente caso contrário, você obter valores mais baixos.

Antes de tomar a medição da temperatura do corpo leva cerca de 30 minutos como as mudanças de temperatura causadas por várias condições que podem ocorrer entre o alojamento local podem afetar os resultados, fazendo com que a medição não confiável.



Uma vez esgotada a carga baterias descartados em recipientes apropriados, em conformidade com os regulamentos.

Este termômetro digital é um dispositivo para medir a temperatura do corpo para uso doméstico, onde o monitoramento contínuo não é exigido pelo pessoal médico e paramédico.

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

<b>Nome do produto:</b>	Nuvita 2070
<b>De energia:</b>	3 VDC (2 x AAA batteries)
<b>Sensor:</b>	IR sensor
<b>Faixa de medição:</b>	32,0°C – 42,9°C (89,6°F – 109,3°F)
<b>Tolerância:</b>	±0,2°C (±0,4°F) From 35,5°C – 42,0°C (95,9°F – 107,6°F)
<b>Dimensões:</b>	152 x 64 x 60 mm
<b>Peso:</b>	70 gr. without batteries
<b>Ambiente:</b>	16°C – 35°C
<b>Umidade:</b>	20%RH – 80%RH
<b>De armazenamento:</b>	-20°C – 55°C (-4,0°F – 131°F)
<b>Umidade:</b>	20%RH – 90%RH



Este símbolo significa que os equipamentos eléctricos e electrónicos devem ser objecto de recolha selectiva e não podem ser eliminados como resíduos urbanos, conforme exigido pela Directiva 2002/96/CE. Portanto, este sistema e todos os componentes, quando você tomar a decisão de descartá-las, devem ser levados para os centros de coleta local para tratamentos de eliminação adequada.



Este dispositivo está em conformidade com os mais importantes e os outros requisitos relevantes das directivas europeias aplicáveis. O dispositivo está em conformidade com a Directiva 93/42/CE alterada pela Directiva 2007/47/CE mais tarde. Organismo Notificado TÜV Rheinland (0197).

### ASSISTÊNCIA

Todo cuidado foi tomado na realização de produtos, acessórios e documentação fornecida na caixa fornecida, por isso em caso de problemas, é aconselhável repetir seguindo fielmente as instruções do manual de instruções. Para qualquer informação sobre o serviço, visite o site [www.nuvitababy.com](http://www.nuvitababy.com).

### GARANZIA

Termini e condizioni In conformità con le attuali normative vigenti, il produttore offre al consumatore una garanzia legale di 24 mesi a partire dalla data riportata nello scontrino fiscale. Sono escluse dalla garanzia legale di 24 mesi le parti identificabili come “consumabili” (esempio: batterie, testine per spazzolini o parti soggette ad usura). La garanzia legale di 24 mesi decade nel caso in cui: Il prodotto ha subito dei danni estetici dovuti ad un utilizzo errato non conforme alle indicazioni riportate nel manuale di istruzioni. Il prodotto è stato modificato e/o manomesso. La causa del guasto è riconducibile ad una cattiva manutenzione dei singoli componenti e/o accessori e/o materiali di consumo (esempio: ossidazioni e/o incrostazioni dovute alla permanenza

di acqua o altre sostanze liquide, sedimenti che ostruiscono il sensore, fuori uscita del liquido corrosivo delle batterie). Sono esclusi dalla garanzia legale di 24 mesi: Costi relativi ad interventi di sostituzione e/o riparazione di parti soggette ad usura o costi relativi alla manutenzione ordinaria del prodotto. Le spese ed i rischi relativi al trasporto del prodotto da e per il punto vendita ove è stato acquistato o altro centro di raccolta abilitato alla ricezione dei prodotti in garanzia. Danni causati o conseguenti ad una installazione non corretta oppure utilizzo errato non conformi alle indicazioni riportate nel manuale di istruzioni. Danni riconducibili a calamità naturali, eventi accidentali oppure condizioni avverse non compatibili con il prodotto.

Difetti marginali che hanno un effetto trascurabile sulle prestazioni del prodotto. Il produttore, il distributore e tutte le società coinvolte nella vendita non si assumono nessuna responsabilità per le perdite economiche e i danni causati dall'eventuale funzionamento non corretto del prodotto. In conformità con le attuali normative vigenti Il produttore, il distributore e tutte le società coinvolte nella vendita non rispondono in nessun caso a danni, compresi quelli diretti, indiretti, la perdita di utile dell'esercizio, i mancati risparmi ed altri particolari danni accessori e conseguenti che vanno al di là dei danni causati dalla violazione della garanzia, del contratto, della responsabilità oggettiva, dovuti ad azione illecita o ad altre cause, risultanti dall'utilizzo o dall'impossibilità di utilizzare il prodotto e/o i documenti cartacei ed elettronici compreso il mancato servizio di assistenza. Visitare il nostro sito [www.nuvitababy.com](http://www.nuvitababy.com) per ulteriori assistenze ed informazioni.