


ES Nuvita 1300 – Bascula digital para bebés

1. Descrizione

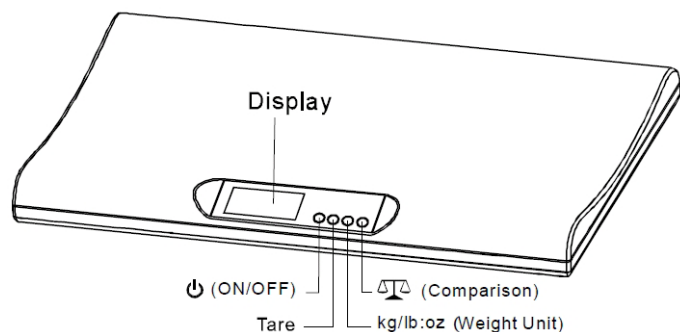

DISPLAY:	Mostrar el peso del bebé y otra información acerca de la escala.
Botón ON/OFF	Activar o desactivar la escala.
botón [TARE]	Le permite deducir el peso de tara inicial.
botón [Kg / lb:oz]	Le permite cambiar la unidad de peso.
botón 	Le permite utilizar la función de COMPARACIÓN, se explica en este manual.

2. Especificaciones

Gama:	0,02 Kg - 18 Kg / 1 oz - 40 lbs
Graduación:	5 gr. / 5 oz
Fuente de alimentación:	2 pilas AA (3,0 V CC)
Indicador de batería:	El icono de batería parpadeará " " si la pila se ha reducido.
Pantalla:	Pantalla LCD con retroiluminación
Dimensiones de la pantalla:	69 x 32,5 mm
Dimensiones:	540 x 345 x 57 mm
Peso neto:	1,95 Kg
Temperatura de almacenamiento:	-10°C – 55°C
Temperatura de funcionamiento:	10°C – 40°C
Precisión de las mediciones de peso:	0.2kg-3.995kg (0.005kg) 4kg-9.995kg (0.010kg) 10kg-18kg (0.015kg)

3. La instalación de la batería

1. Gire la escala y abra la tapa del compartimiento de la batería en la parte inferior.
2. Inserte dos pilas estándar de tamaño AA asegurándose de seguir la polaridad indicada en el compartimiento de la batería
3. Cierre la tapa del compartimiento de las pilas y colocar la báscula sobre una superficie plana y dura para pesar al bebé. Tapiz de superficie blanda, no es conveniente para el pesaje.
4. Antes de poner a un bebé en la escala, asegúrese de que la superficie de la escala está completamente seco y no resbaladizo.

4. Misurazione del peso (normale)

1. Pulse el botón " " para encender la escala. Cuatro barras y mostrar el icono de la batería y el cambio a la Fig. 4.2.

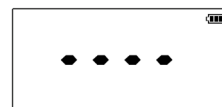


Fig. 4.1

2. "0.000 Kg" y el icono de la batería mostrará. "0:0 lb:oz" si ha seleccionado lb / oz unidades.



Fig. 4.2

3. Ponga al bebé en la escala. El peso se determina cuando aparece "Hold".

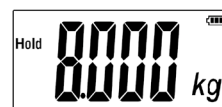


Fig. 4.3

NOTA

Dado que un bebé es un objeto en movimiento, el peso en la pantalla varía durante el proceso de pesaje. Se tendrá 15 segundos para que la escala para coger un peso del bebé en movimiento y bloqueo de la misma. El peso bloqueada mostrará 10 segundos y luego la báscula se apagará automáticamente).

4. "Err" mostrará si la balanza está sobrecargada.

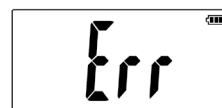


Fig. 4.4

5. Tara

This feature allows you to weigh and to exclude the weight of any tissue or blanket placed on the scale when weighing the naked baby.

1. Pulse el botón " " para encender la escala. Cuatro barras y mostrar el icono de la batería y el cambio a la Fig. 5.2.

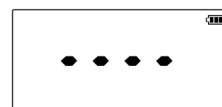


Fig. 5.1

2. "0.000 Kg" y el icono de la batería mostrará. "0:0 lb:oz" si ha seleccionado lb / oz unidades.

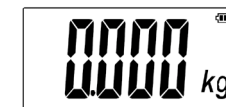


Fig. 5.2

3. Place the blanket on the scale. Weight of the blanket will show.



Fig. 5.3

4. Cuando aparezca "Hold" pulse la tecla [TARE] botón inmediatamente.



Fig. 5.4

5. "0.000 Kg" (0:0 lb:oz si ha seleccionado lb / oz unidades), TARE y el icono de la batería mostrará.



Fig. 5.5

6. NOTA: Deja la manta en la escala. Si se quita la manta de la escala, la pantalla mostrará un peso negativo



Fig. 5.6

7. Coloque al bebé desnudo en la manta. Peso neto del bebé desnudo mostrará cuando aparezca "Hold". La balanza se apagará automáticamente después de 10 segundos.

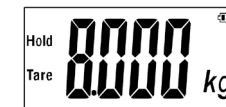


Fig. 5.7

6. Selector de las unidades

1. Pulse el botón " " para encender la escala.
2. Antes de colocar el bebé sobre la báscula, pulse [kg / lb:oz] para seleccionar la unidad de peso.
3. La unidad de peso determinado mostrará cuando la escala se conecta la próxima vez.

7. " " COMPARACIÓN

1. Antes de alimentar al bebé, utilizar la función de peso normal
2. (véase el capítulo 4) que el peso del bebé. El peso del bebé antes de la alimentación se almacena en "Hold" aparece. Retire el bebé de la escala y alimentar al bebé
3. Después de alimentar al bebé, presione el botón " " una vez para encender la balanza. Cuatro barras y mostrar el icono de la batería y el cambio a la fig.7.4
4. Mostrará el peso del bebé antes de alimentar. (NOTA: Esta es una figura menos)

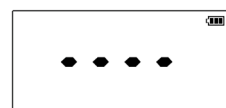


Fig. 7.3



Fig. 7.4

5. Ponga al bebé alimentado con leche en la escala, el peso de la leche alimenta a su bebé se muestran.



Fig. 7.5

Ejemplo

Si el peso del bebé antes de la alimentación es 8,0 Kg, 8,0 Kg este será almacenado después de que el bebé pesó utilizando la función normal de peso (véase el capítulo 4). "8.000 Kg" (menos 8,0 Kg) se muestran cuando esta " " se pulsa el botón. Luego ponga el bebé alimentado con leche en la escala. Peso de la leche alimenta a su bebé mostrará. Si el bebé se alimenta con 320 gr. (Peso) de la leche, "0320 Kg" se verá. El peso total del bebé con alimentados con leche es

$$8,000 \text{ Kg} + 0,320 \text{ Kg} = 8,320 \text{ Kg}$$

La escala se apagará automáticamente después de 10 segundos.

⚠ Advertencia y normas generales de seguridad

- Lea las instrucciones de este manual antes de usar este aparato. Contiene información importante sobre el uso de este aparato y las reglas de seguridad.
- Cualquier operación incorrecta y el uso inadecuado puede dañar el aparato y provocar peligro para el usuario.
- Nunca deje al bebé sin supervisión durante el pesaje.
- Use la escala sólo para niños con peso por debajo de la capacidad máxima. Más de carga puede causar daños y el peligro.
- Para limpiar la escala con un paño suave humedecido con un poco de agua. No sumerja la balanza en el enjuague líquido o bajo el chorro de agua.
- Para la limpieza no utilice detergentes o disolventes agresivos o abrasivos.
- Cuando la escala está en uso, mantenga alejado de cualquier fuente de ondas electromagnéticas, tales como horno de microondas, teléfonos móviles y redes inalámbricas.
- No cortocircuite los polos de la batería.
- No trate de reparar el aparato por sí mismo para evitar cualquier peligro relacionado con la electricidad.
- Nunca deje que los niños jueguen con los materiales de embalaje, especialmente bolsas de plástico. Las bolsas de plástico pueden causar asfixia.
- En caso de mal funcionamiento del ventilador o electrostática, vuelva a reanudar las actuaciones historias batería normal.
- Si la pantalla muestra el mensaje de error "Err", apague la balanza. A continuación, cambie de nuevo y siga las instrucciones.
- Nunca deje nada cuando no a la plataforma de la escala en el uso.
- No utilice la escala a una carga constante, ya que puede dañar el mecanismo de medición.
- El registrador de Peso en la memoria se borran cuando se colocan las pilas.
- La balanza se apagará automáticamente in1 minuto después

de la escala está encendido y no en uso. Para apagar la escala inmediatamente, pulse el botón " " y contener cerca de la segunda mitad

- Evite los movimientos bruscos o los caídos de la escala.
- La escala se destina para uso privado y para medir el peso del bebé. No está permitido el uso de la escala en la medicina o para usos distintos del uso privado.
- A medida que la escala se dirige exclusivamente a uso privado está exento de la obligación de presentar el instrumento de las inspecciones periódicas de la ley, indicando que son para proteger a la exactitud y fiabilidad de la regularidad de las operaciones.

GARANTIA – CONDICIONES

Este producto tiene una garantía de 24 meses sobre los materiales y los defectos de fabricación del producto, después de la fecha de compra (mira ticket de compra).

La garantía de 24 meses no incluye daños causados por el uso habitual de objetos clasificados como material del consumo (pilas, cabezales o partes sujetas a desgaste diario).

La garantía legal de 24 meses es invalida si:

- El producto tiene daños estéticos debidos a uso inadecuado del producto no conforme a las instrucciones contenidas en el manual.
 - El producto ha sido modificado y/o dañado.
 - La causa del malfuncionamiento es debida a la poca manutención de los componentes y/o accesorios y/o piezas (ej. Oxidación y/o redimensionamiento debido a retención de agua u otros líquidos, residuos que bloqueen el sensor, perdida del liquido corrosivo de las baterías).
- Los siguientes están excluidos por la garantía legal de 24 meses:
- Costos de sustitución y/o reparación de partes sujetas a uso habitual o costes para la manutención ordinaria del producto.
 - Costes y riesgos generados por el transporte del producto desde y hacia la tienda donde ha sido comprado o centro de asistencia técnica autorizado a recibir productos en garantía.
 - Causa por daños que derivan de una incorrecta instalación o uso impropio o no en conformidad con las instrucciones del manual.
 - Daños debidos a calamidades naturales, accidentales o condiciones adversas no compatibles con el producto.
 - Defectos que tienen un efecto desdeñable sobre las prestaciones del producto.

El productor, el distribuidor y todas las partes implicadas en la venta del producto no asumen alguna responsabilidad por perdidas y daños económicos de cualquier malfuncionamiento del producto. Según la normativa vigente, el productor, el distribuidor y todas las partes implicadas en la venta no responden en ningún caso por daños, deformidades, incluidas las directas, indirectas, perdida de renta neta, perdida de ahorros y daños añadidos y otros detalles o consecuencias que exceden los daños causados de la violación de la garantía, contrato, responsabilidad objetiva, ilícita u otras causas que derivan de la utilización o imposibilidad de utilizar el producto y/o documentos de papel o electrónicos, incluida la falta de servicio.

Para mas informaciones sobre el servicio de asistencia, visitar el sitio www.nuvitababy.com